

АППАРАТ ДЛЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА «АРКА»

Аппарат предназначен для автоматического проведения непрямого массажа сердца (НМС) пациентам с остановкой сердца и дыхания, представляет собой роботизированное устройство, заменяющее спасающего (врача, фельдшера, спасателя) при выполнении НМС. Это позволяет освободить руки спасающего для проведения других необходимых манипуляций (инъекций и вливаний медикаментов, диагностики, проведения дефибрилляции, интубации, кислородной терапии и прочее), а также для поддержания постоянного качества НМС (стабильных параметров глубины и частоты компрессий). При этом существенно повышается вероятность не только спасения жизни пациента, но и сохранения его дееспособности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Глубина компрессий	53 ± 3 мм
Частота компрессий	105 ± 5 уд./мин
Тип батареи	Li-ion
Размеры грудной клетки пациента:	
• высота	от 170 до 305 мм
• ширина	не более 450 мм

ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ:
не менее 92 минут от 2-х аккумуляторов, ёмкостью 3200 мАч

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СУМКЕ -РЮКЗАКЕ
620х350х230 мм

МАССА АППАРАТА В СОБРАННОМ ВИДЕ
7,9 кг

ТРИ РЕЖИМА ПРОВЕДЕНИЯ СЛР:

15/2

«15:2» — 15 сжатий грудной клетки пациента, за которыми следует пауза для двух вдохов

30/2

«30:2» — 30 сжатий грудной клетки пациента, за которыми следует пауза для двух вдохов

CONT

«CONT» — непрерывные сжатия грудной клетки пациента

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы скорой медицинской помощи (СМП), медицины катастроф, службы спасения различных ведомств, отделения больниц, клиник, госпиталей, военная медицина.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА «АРКА»

Интеллектуальные права защищены патентом на изобретение №2818452

- Две полностью заряженные батареи с возможностью «горячей замены» обеспечивают непрерывную работу Аппарата не менее 92 мин, дополнительная батарея в комплекте
- Быстрое и точное позиционирование аппарата на пациенте благодаря оптической системе визуализации
- Адаптивное управление ускорением и торможением двигателя в зависимости от ригидности грудной клетки пациента, что обеспечивает постоянство заданной глубины компрессии
- Боковые стойки Аппарата имеют прорези, образующие ручки с возможностью вертикального или горизонтального хвата с любой из сторон, что упрощает, ускоряет и облегчает переноску и запуск Аппарата в работу даже в труднодоступных местах
- Опорная пластина выполнена из рентгенопрозрачного композитного материала и оснащена улавливателями замковых соединений, что облегчает её сочленение со стойками боковыми
- Замковые соединения оснащены демпферами, которые минимизируют динамические люфты и снижают уровень шума при работе Аппарата
- Удобный, эргономичный и функциональный рюкзак для переноски Аппарата

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА СЛР «АРКА» СОВМЕСТНО С МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ:

- Дозатор шприцевый портативный лекарственных средств «ДШП 5-20-Шмель»
- Аспиратор электрический портативный АЭП-01 «ВИХРЬ» для машин СМП
- Аппарат ИВЛ РИТМ 100 «ТМТ» (портативный)
- Монитор CO₂ портативный реанимационный «КапноТест»/«МиниКап»
- Аппараты дыхательные ручные АДР-МП

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Блок функциональный «АРКА»	1 шт.
Пластина опорная	1 шт.
Комплект присосок вакуумных одноразовых (включает две присоски вакуумные)	1 компл.
Комплект батарей перезаряжаемых (включает две батареи перезаряжаемые)	1 компл.
Комплект адаптера сетевого (включает адаптер сетевой и шнур сетевой)	1 компл.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Присоска вакуумная одноразовая	1 шт.
Батарея перезаряжаемая	1 шт.
Устройство зарядное	1 шт.
Кабель внешнего питания (для подключения устройства зарядного к бортовой сети 12-24 В);	1 шт.
Ремень для фиксации руки пациента «АРКА»	2 шт.
Ремень для переноски «АРКА»	1 шт.
Ремень стабилизирующий «АРКА»	1 шт.
Сумка-рюкзак «АРКА»	1 шт.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:

Средний срок службы Аппарата	не менее 5 лет
Ожидаемый срок службы Аппарата	8 лет
Степень защиты	IP 43




ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН

- **ЭКСПЛУАТАЦИИ** от -5 °С до +41 °С
от -20 °С до -5 °С в течение не менее 1 часа
от +41 °С до +50 °С в течение не менее 20 мин
- **ХРАНЕНИЯ** от -20 °С до +60 °С

АРКА

АППАРАТ СЛР

ДЛЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА

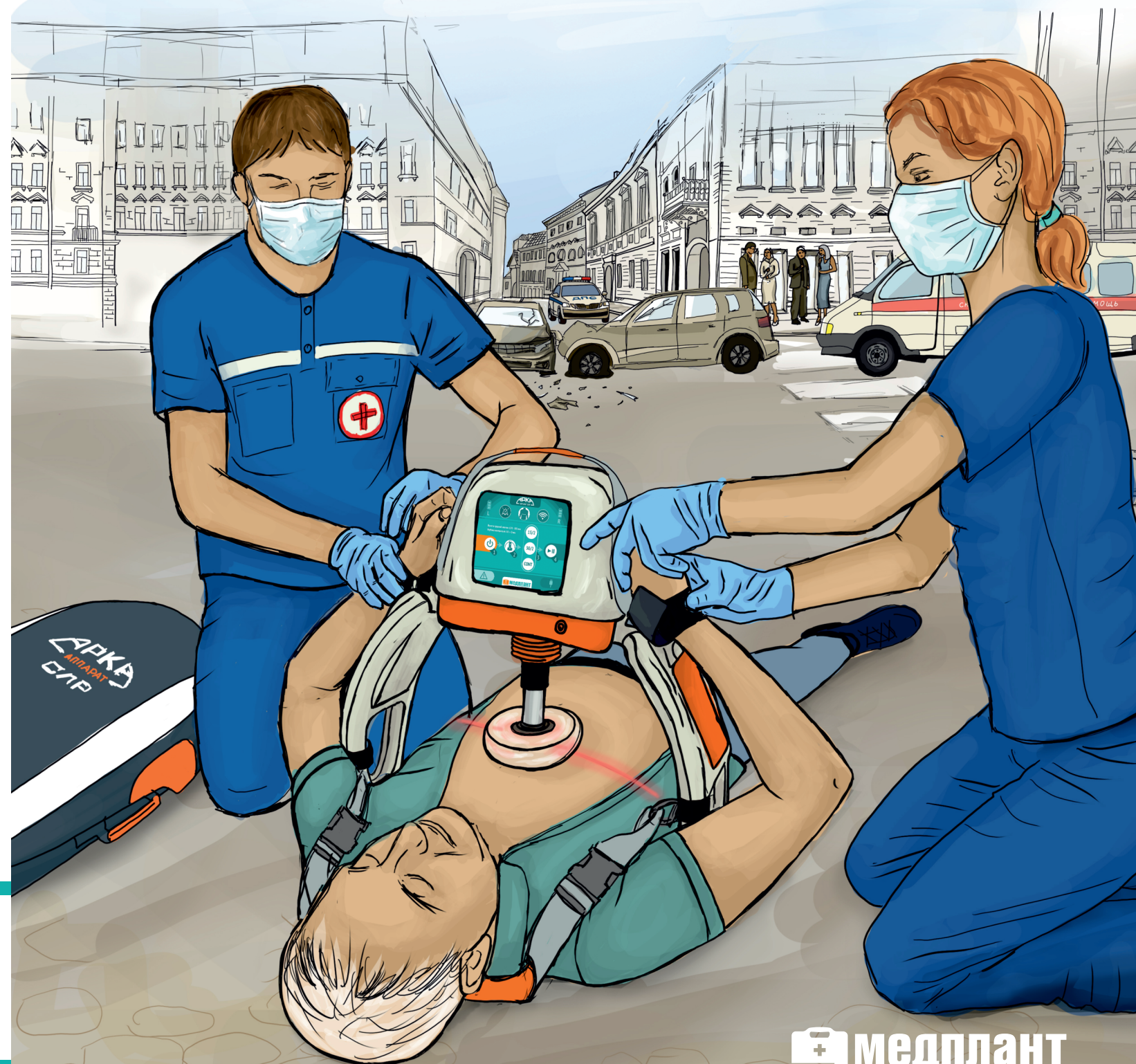

РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА ПЛОЩАДКАХ КОМПАНИИ «МЕДПЛАНТ» В ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»

 **медплант**
Медицинские изделия для экстренной помощи

г. Москва, Волгоградский пр-т 42, корп.5, Технополис «Москва»
e-mail: medplant@medplant.ru, www.medplant.ru
т.: +7 (495) 223-60-16 (многоканальный), +7 (495) 223-66-38



РЕЗИДЕНТ
ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС МОСКВА»

 **медплант**